


## Descongelador de pajuelas de semen

2 MODELOS

1



### TEMPERATURA UNIFORME

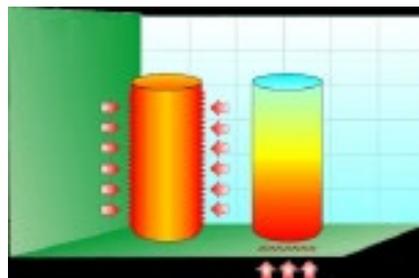

Sus 3 resistencias, distribuidas a lo largo del tubo de descongelado, junto con los 3 sensores, logran un calentamiento uniforme desde la superficie del agua, hasta el fondo del tubo, evitando el choque térmico al introducir la pajuela.

[contacto@vetcomunicaciones.com.ar](mailto:contacto@vetcomunicaciones.com.ar) | [comercial@vetcomunicaciones.com.ar](mailto:comercial@vetcomunicaciones.com.ar)

Tel: +54 - 0342-4535414 | Cel: +54 (9) 0341-156623537 / Cel: +54 (9) 0342-156103030 | Dirección: Marcial Candiotti 4084. S3000 Santa Fe

[WWW.VETCOMUNICACIONES.COM.AR](http://WWW.VETCOMUNICACIONES.COM.AR)

## PROGRAMACIÓN DE TEMPERATURA



2

Desde su menú podés elegir la temperatura óptima para el descongelado de la pajuela a usar.

## TIEMPO PROGRAMABLE

Esta función es primordial al momento de inseminar en serie, ya que optimiza los tiempos de inseminado y asegura un correcto tiempo de la pajuela en el agua.

## LUZ INTERNA



Para facilitarte la visión dentro del tubo, en momentos de poca iluminación, agregamos una luz LED que se enciende cuando empieza el proceso de descongelado.

## TENSIÓN 220V. Y 12V



Cuenta con un transformador para que lo uses con la red doméstica o con un adaptador de 12V para la toma de un vehículo, de esta forma, si tenés un corte de suministro eléctrico podés continuar el trabajo con la toma de 12V vehicular.

## AVISO SONORO Y VISUAL

Está equipado con un parlante que te avisa cuando transcurrió el tiempo programado de descongelamiento de la pajuela, ayudado del display que te muestra los segundos transcurridos, optimizando las tareas posteriores.

3

## DE FÁCIL MANEJO

Su menú interactivo logra una rápida calibración de los parámetros para empezar rápidamente la tarea.



## PRESENTACIÓN



## TECLAS Y DISPLAY 100% PROTEGIDAS

Gracias al frente de policarbonato logramos proteger las teclas y el display del agua y del polvo, que son muy comunes en el ambiente de uso.

contacto@vetcomunicaciones.com.ar | comercial@vetcomunicaciones.com.ar

Tel: +54 - 0342-4535414 | Cel: +54 (9) 0341-156623537 / Cel: +54 (9) 0342-156103030 | Dirección: Marcial Candiotti 4084. S3000 Santa Fe